




SciCan OPTIM 1

ET-TRINS RENSE- &
DESINFEKTIONSPRÆPARAT

Aktiv ingrediens: 0,5% Hydrogenperoxid

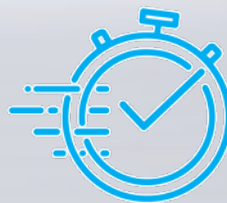

1 MINUT
KONTAKTTID*

Hurtig og Skånsom

Med OPTIM 1 går du ikke på kompromis med effektivitet og beskyttelse. Med en hurtig bredspektret kontakttid, er det et af de hurtigste og mest effektive rens- & desinfektionspræparater. Det er også sikkert og skånsomt for dig og overflader. OPTIM 1 gør, at du kan føle dig sikker på, at du er kompatibel, og beskytter dine patienter, kolleger og miljøet; den perfekte balance.



Hurtigt bredspektret desinfektionspræparat

Overflader skal holdes våde under hele kontakttiden for at blive desinficeret.

- › Adeno, Polio, Murino Noro på kun 30 sekunder iht. EN 14476
- › Tuberkulosedræbende & svampedræbende på 1 minut
- › Bakteriedræbende & virusdræbende på 30 sekunder iht. EN 13727 og EN 14476
- › Fuldstændigt virusdræbende på 2 minutter iht. RKI/DVV standard (Polio, Adeno, Murino Noro, SV40)
- › Effektiv på 1 minut iht. EN 16615
- › Fremragende opugningsevne – holder sig våde længe nok til udløbet af kontakttiden



Kompatibel

Kompatibel med en bred vifte af hårde, uporøse materialer og overflader.



Sikker og skånsom

- › Uden kunstige duftstoffer
- › Ugiftig
- › Ikke-irriterende for hud, øjne og åndedrætsorganer
- › Ingen GHS farepiktogrammer, signalord eller erklæringer
- › Efterlader ingen aktive rester; bidrager ikke til den antimikrobielle modstand



Miljøvenlig

Den aktive ingrediens Hydrogenperoxid nedbrydes til vand og ilt og efterlader ingen aktive rester, hvilket reducerer miljøbelastningen.



Effektivt et-trins renspræparat

Et effektivt 1-trins rens- og desinfektionspræparat, som fjerner de organiske rester under desinficeringen.

COLTENE

* Effektiv inden for 1 minut i henhold til europæiske standarder; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se bagside). I henhold til den krævede RKI / DVV-standard i Tyskland er OPTIM 1 FULDSTÆNDIGT VIRUSDRÆBENDE inden for 2 minutter.



Hurtige kontakttider

OPTIM 1 giver bevist overlegen dræbrydelse; konsistente kontakttider er hurtigere, hvilket sikrer kompatibilitet, og sørger for tilliden til, at desinfektion er opnået.

OPTIM 1 er bevist effektiv mod patogener, som er vanskelige at dræbe, så som Adeno, Polio og Murino Norovirus, hvilket giver dig tillid til, at din facilitet er beskyttet mod alvorlige patogener.

OPTIM 1 krav til effektivitet og brugsanbefalinger

| Overfladedesinfektion med mekanisk bevægelse | STANDARD | TESTORGANISMER | KONTAKTTID [†] | FORURENING-STILSTANDE | TEMPERATUR | BRUGS KONCENTRATION |
|--|--|---|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Virusdræbende | EN 14476 | Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murin Norovirus-stamme S99 Berlin | 30 sek. | Snavsede betingelser | Stuetemperatur | Ufortyndet |
| Fuld Virucial (Kun Tyskland)* | RKI-Anbefaling Bundesgesundheitsblatt (tidsskriftet fra fundssundhedskontoret) 01/2004 | Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murin Norovirus-stamme S99 Berlin, Polyomavirus SV-40 | 2 min. | Snavsede betingelser | Stuetemperatur | Ufortyndet |
| Bakteriedræbende | EN 13727, | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa | 30 sec. | Snavsede betingelser | Stuetemperatur | Ufortyndet |
| | EN 16615** | | 1 min. | Snavsede betingelser | | |
| Tuberkulosedræbende/ Mycobakteriedræbende | EN 14348 | Mycobacterium terrae | 1 min. | Snavsede betingelser | Stuetemperatur | Ufortyndet |
| Svampedræbende | EN 13624 | Candida Albicans, Aspergillus brasiliensis | 1 min. | Snavsede betingelser | Stuetemperatur | Ufortyndet |
| Gærdræbende | EN 13624, EN 16615** | Candida Albicans | 1 min. | Snavsede betingelser | Stuetemperatur | Ufortyndet |

* FULDSTÆNDIGT SVAMPEDRÆBENDE betyder, at desinfektionsmidlet kan deaktivere indhyllede og ikke-indhyllede virusser i henhold til tyske DVV-teststandarder. For at gøre en fuldstændig virusdræbende påstand, skal desinfektionsmidlet være i stand til at deaktivere Adenovirus, Poliovirus, SV40 og Murino Norovirus.

** Begrænsninger / restriktioner - Test iht. EN 16615: Gælder kun for serviet-varenummer SCI33R18 / SCI33R18XL. Brug kun SciCan Dry Wipes varenummer SCI33R18/SCI33R18XL til OPTIM Liquid.

†Aftør overfladen, og sørg for, at overfladen er våd under hele kontaktføreløbet.

Renseefficiens

Et-trins rensespræparat

Sikkerhed

GHS Påkrævede farepigtoogrammer

Ikke påkrævet

Ikke-irriterende for øjnene

Ja

Ikke-irriterende for huden

Ja

Bestillingsinformation for OPTIM 1

Klar-til-brug klargjorte servietter

OPTEU1-12W RTU Servietter 15 x 18 cm (12 x 160 stk./æske)

Væske

OPTEU1-4x4 1 æske med 4 x 4 liter

Tilbehør

FND30 Pumpe til 1 Gallon flaske



EC REP

Coltène/Whaledent GmbH+Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau