




Welch Allyn ProBP™ 2000 Digital blodtryksmåler




Hurtige og nøjagtige automatiske blodtryksmålinger lige ved hånden

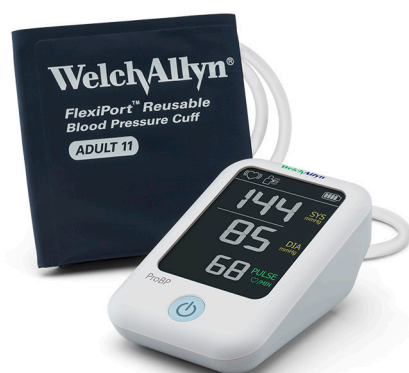

WelchAllyn®

Welch Allyn ProBP 2000 - den **PERFEKTE BLODTRYKSLØSNING** til dit plejemiljø

Vi har kombineret to af vores innovative teknologier til forbedring af undersøgelser for dig og dine patienter.

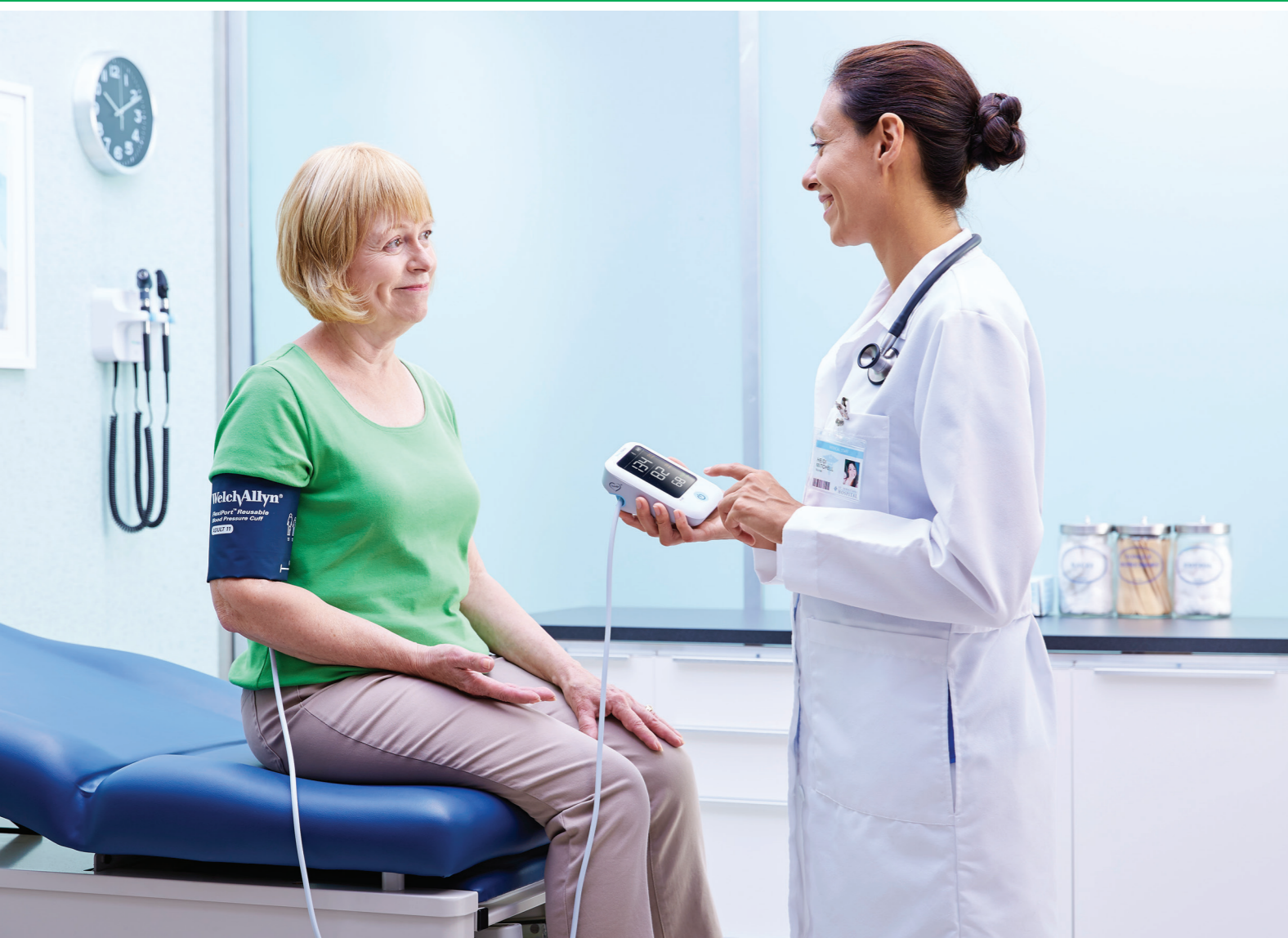

Welch Allyn SureBP® teknologi

Vores SureBP inflationsbaserede algoritme bruges på tværs af Welch Allyn-enheder til måling af vitale parametre, der hjælper klinikere i alle typer plejemiljøer registrere automatiserede, hurtige og nøjagtige blodtryks aflæsninger.

- Blodtryks aflæsninger registreres mere komfortabelt ved inflation og tager ca. 20 sekunder
- Overholder AAMI-standarden for blodtryksnøjagtighed
- Med tryk på en knap starter enheden registreringen af manchetinflation
- 97 % gennemførelse ved bevægelse¹

“SureBP-teknologi giver store fordele, hvad angår hastighed og patientkomfort... og er en ny teknologi, som klinikere kan have tillid til?”

Dr. Bruce S. Alpert | University of Tennessee,
AAMI Sphygmomanometer Committee Chair

Welch Allyn FlexiPort® blodtryksmanchetteknologi

Brug af den korrekte manchettørrelse er en vigtig faktor for at opnå præcise aflæsninger. Welch Allyn FlexiPort-manchetter fås i mange forskellige størrelser for at imødegå en større udsnit af patientpopulationen, så det sikres, at den rigtige manchettørrelse bruges hver gang for at understøtte nøjagtighed.

- Unikt "klikssystem", enkeltpunktstilslutning hjælper med at fjerne besværet med traditionelle manchetslanger og forbindelser for bedre at understøtte et travlt workflow
- ProBP 2000 er kompatibel med FlexiPort manchetter til flergangsbrug, fra barn op til stor voksen og lår (15-55 cm)
- Når den kombineres med SureBP-teknologi, hjælper den med at registrere aflæsninger ved inflation på ca. 20 sekunder¹



NØJAGTIGHED



PÅLIDELIGHED



HASTIGHED

Når du søger en klinisk digital blodtryksmåler, kan **nøjagtighed** og **pålidelighed** være dine største bekymringer. Welch Allyn har designet de nye ProBP 2000 digitale blodtryksmålere med teknologifunktioner, der giver resultater, du kan føle dig tryk ved.



WELCH ALLYN
FlexiPort® genanvendelige
BLODTRYKSMANCHETTER



Produktspecifikationer for ProBP 2000 digital blodtryksmåler

Udvendige mål	Bredde: 94 mm (3,70 tommer) Længde: 142 mm (5,59 tommer) Højde: 66 mm (2,59 tommer)
Vægt	283 g (0,62 lbs) uden batterier
Display	Digital LCD V.A. 68 mm x 90 mm, tryk og puls vises
Strømdstyr	4 AA alkaliske batterier, 6VDC (medfølger) AC strømforsyning (107041) Indgang: 100-240 V, 50-60 Hz, 400 mA Udgang: 6 V, 1
Metode	Oscillometrisk
Måleområde	Nominelt manchetryk: 0 mmHg - 299 mmHg (0 kPa - 40 kPa) Måling af tryk: Systolisk: 50-260 mmHg diastolisk: 25-220 mmHg puls: 40 til 199 slag/minut
Nøjagtighed	Tryk: +/- 0,4 kPa (3 mmHg) Pulsværdi: +/- 4 %

Reserve dele og tilbehør *

KONFIGURATIONER

- 2000** ProBP 2000 digital blodtryksmåler, størrelse 11 voksen FlexiPort-blodtryksmanchet til flergangsbrug, 4 AA-batterier
2000-P ProBP 2000 digital blodtryksmåler, størrelse 11 voksen FlexiPort-blodtryksmanchet til flergangsbrug, 4 AA batterier og strømforsyning

TILBEHØR

107041 Strømforsyning
(inklusive USA, EU, UK,
AU strømadaptore)

FLEXI-PORT-BLODTRYKSMANCHETTER

REUSE-09 Barn (15-21 cm)
REUSE-10 Lille voksen (20-26 cm)
REUSE-11 Voksen (25-34 cm)
REUSE-11L Voksen lang (25-34 cm)

REUSE-12 Stor voksen (32-43 cm)
REUSE-12L Stor voksen lang (32-43 cm)
REUSE-13 Lår (40-55 cm)

*Kontakt din lokale Welch Allyn-repræsentant for en komplet liste over konfigurationer og tilbehør, der fås i dit område.

Du kan få mere at vide på emeai.welchallyn.com eller kontakte den lokale Welch Allyn-salgsrepræsentant.

¹ Welch Allyn Motion Tolerance Clinical Study, August 2016

² Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP® algorithm for automated blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, August 2007.



Welch Allyn EMEAI kundeservice
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath, Irland
Tlf.: +45 38 48 73 57
nordicorders@welchallyn.com

WWW.WELCHALLYN.DK

WelchAllyn®

Hill-Rom®

©2018 WELCH ALLYN, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES. DOK. NR: SM4158DA REV.A MCI4918, MAJ 2018

ProBP 2000 digital blodtryksmåler er beregnet til brug ved måling af blodtryk og puls i pædiatriske og voksne patientpopulationer. Medicinsk udstyr (93/42/EØF): Klasse IIa. Bemyndiget organ: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197)
 Producent: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd. No. 105 Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan, 528437, Guangdong, Kina. EU-rep.: MDSS-medicinsk udstyr Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Tyskland. Dette medicinske udstyr er et lovgivningsomfattet sundhedsprodukt, som i henhold hertil bærer CE-mærket. Welch Allyn anbefaler, at du omhyggeligt læser de detaljerede anvisninger vedrørende sikker og korrekt brug i de dokumenter, der leveres sammen med det medicinske udstyr. Personalet på hospitaler er ansvarlig for korrekt brug og vedligeholdelse af dette medicinske udstyr. Welch Allyn forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, specifikationer og modeller uden varsel. Den eneste garanti, Welch Allyn giver, er en udtrykkelig skriftlig garanti, der omfatter salg af dets produkter.