

INTET PASSER SÅ GODT SOM ORIGINALEN!

SECUR-LOK* MED SIKKERHEDSRING

- Tilsluttes MIC-KEY*-ernæringsventilen så den specialudviklet Secur-Lok- låsemekanisme - der automatisk åbner/lukker ernæringsventilen på MIC-KEY*, når du drejer forlængerslangen 3/4 omgang
- Mindre risiko for lækage på grund af den designede og testede kompatibilitet
- Sikkerhedsring hjælper med at forhindre utilsigtet tilkobling til intravenøse infusionsæt



BREDT UDVALG AF MIC-KEY FORLÆNGERSLANGER



SECUR-LOK* anordningen med sikkerhedsring i patientenden passer perfekt ind i MIC-KEY*-ernæringsventilen uden at beskadige anti-tilbagelæbsventilen.

TIL KONTINUERLIG ERNÆRING: Y-forlængerslange, lige, varenr.: 0141-12 og 0141-24

- Udstyret med ENFit®-ernærings- og medicineringsport (han) med skruelåg
- Fås i 2 længder: 30 cm og 60 cm



Bolus forlængerslange, vinklet, varenr.: 0144-12 og 0144-24

- Udstyret med et ENFit®-ernæringsport (enkelt ende, han)
- Fås i 2 længder: 30 cm og 60 cm

TIL BOLUS-ERNÆRING: Bolus forlængerslange, lige, varenr.: 0143-12 og 0143-24

- Udstyret med bred åbning giver mulighed for at indgive vand og bolus-ernæring med en ENFit®-sprøjte (hun)
- Fås i 2 længder: 30 cm og 60 cm



TIL MEDICIN INDGIFT: Y-forlængerslange, vinklet, varenr.: 0142-02

- Forlængeslange 5 cm med dobbelt ENFit®-porte og skruelåg er velegnet til indgivelse af medicin



Enteral ernæring, medicin og væske skal indgives via en MIC-KEY*-forlængerslange, som er tilsluttet MIC-KEY*-ernæringssonden

MIC-KEY*: DEN ORIGINALE ERNÆRINGSSONDE
 MED TILHØRENDE FORLÆNGERSLANGER OG
 MED PRODUKTEGENSKABER SOM **SECUR-LOK OG**
SIKKERHEDSRING I FORLÆNGERSANGERNE!



Gennemskyl forlængerlangerne med varmt sæbevand efter brug, og skyl grundigt efter. Opbevares på et tørt og rent sted.

Hurtig gennemskylning forhindrer, at sondemaden tørrer ud og sætter sig fast på indersiden af forlængerlangen. Af hygiejniske og funktionelle årsager anbefales det at udskifte MIC-KEY-forlængerlangerne hver uge.

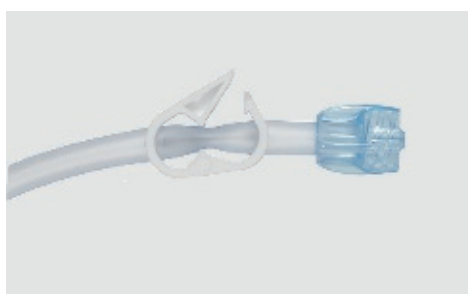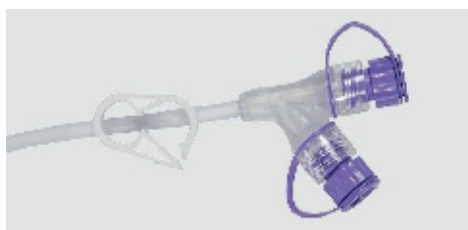

BESKRIVELSE	LÆNGDE	PAKKE	VARENUMMER
Y-forlængerlange vinklet med ENFit®	30 cm	5 stk.	0141-12
Y-forlængerlange vinklet med ENFit®	60 cm	5 stk.	0141-24
Y-forlængerlange vinklet med ENFit®	5 cm	5 stk.	0142-02
Bolus forlængerlange lige med ENFit®	30 cm	5 stk.	0143-12
Bolus forlængerlange lige med ENFit®	60 cm	5 stk.	0143-24
Bolus forlængerlange vinklet med ENFit®	30 cm	5 stk.	0144-12
Bolus forlængerlange vinklet med ENFit®	60 cm	5 stk.	0144-24

Dette produkt er medicinsk udstyr. Læs altid brugsanvisningen inden brug, Kontakt din læge/sygeplejerske hvis du er i tvivl.

For at få yderligere oplysninger kan du sende en e-mail til
 Avanos på customerservice.nordics@avanos.com
 eller ringe til
 Sverige: +46 2 088 14 00
 Danmark: +45 808 26003
 Norge: +32 2 700 68 51
 Finland: +358 80 04 12 163

AVANOS

www.avanos.com